

rollz®

pour aller plus loin



rollz®

Rollators au design élégant et ergonomique

La vie reste un parcours de découverte. Continuez à profiter pleinement de la vie avec un beau rollator de Rollz. Qu'il s'agisse d'une promenade dans le parc, de la visite d'une exposition dans un musée, d'une croisière ou d'un après-midi de shopping. Nos rollators design ergonomiques Rollz Motion et Rollz Flex vous permettent de continuer à faire les choses que vous aimez faire.

...



Sortez sans souci avec le Rollz Motion²

Rollator et chaise roulante en un seul appareil

Avec le Rollz Motion, vous sortez sans souci. Profiter pleinement d'une belle journée en ville en marchant derrière le rollator ou en s'asseyant dans la chaise roulante. Errer dans le centre historique, se reposer un peu dans la chaise roulante dans le parc ombragé, et de nouveau marcher en direction de cette belle brasserie comme point d'orgue d'une journée variée et riche en émotions.



rollz motion

Caractéristiques du produit Rollz Motion²

Élégant

Rollator et chaise roulante au design néerlandais récompensé pour partir de manière élégante.

Sûr

Freinage sûr et dosé par n'importe quel temps grâce aux freins à tambour.

Se reposer

Sur le coussin du siège, vous pouvez vous reposer, ou vous pouvez aussi transformer le rollator en fauteuil roulant

Franchir les seuils

Avec l'aide pour franchir les seuils, vous franchissez facilement les seuils et les bordures de trottoirs.

Maniable

Manœuvrer facilement dans les petits espaces grâce au rayon de braquage très court.

Stable


Marcher droit et de manière sûre entre les poignées ergonomiques qui sont ajustables en hauteur.

Compact

Le Rollz Motion est facile à replier pour être compact. Il peut alors se ranger dans la voiture.

Confort de conduite

Les grandes roues arrière et les poignées en mousse assurent le confort de conduite.

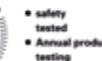

En un tournemain

Vous transformez sans peine ce rollator en chaise roulante et inversement.

Marchez de manière stable, bien droit et confortablement et reposez-vous en chemin dans la chaise roulante comme vous le souhaitez.

...



rollz motion

Données de produit

Rollz Motion² : poids 10,7 kg

Pack chaise roulante : 3,7 kg

Charge maximum : 125 kg

Taille utilisateur : env. 1,60-1,90 m

HxLxL déplié : 87-102 × 65,5 × 63 cm

HxLxL replié : 90-102 × 31 × 63 cm

Profondeur du siège : 42 cm

Largeur du siège : 45 cm

Hauteur du siège : 55 cm

Diamètre roue avant : 8 pouces

Diamètre roue arrière : 12 pouces

Garantie : 5 ans sur le cadre et 2 ans sur les autres pièces. Pièces sensibles à l'usure non comprises.

Le Rollz Motion est certifié par TÜV comme rollator et chaise roulante.

...



Rollz Motion² Small : poids 10,7 kg

Pack chaise roulante : 3,7 kg

Charge maximum : 125 kg

Taille utilisateur : env. 1,50-1,85 m

HxLxL déplié : 87-102 × 65,5 × 63 cm

HxLxL replié : 85-95 × 31 × 63 cm

Profondeur du siège : 42 cm

Largeur du siège : 45 cm

Hauteur du siège : 50 cm

Diamètre roue avant : 8 pouces


Diamètre roue arrière : 12 pouces

Le Rollz Motion² est disponible en quatre couleurs : **dark purple, pebble white, island blue** et **matt black**.

La petite version 'small' est disponible en **island blue** et **matt black**.



« A présent j'ose marcher plus longtemps avec le rollator car je sais que je pourrai me reposer en chemin dans la chaise roulante si je suis fatigué. »

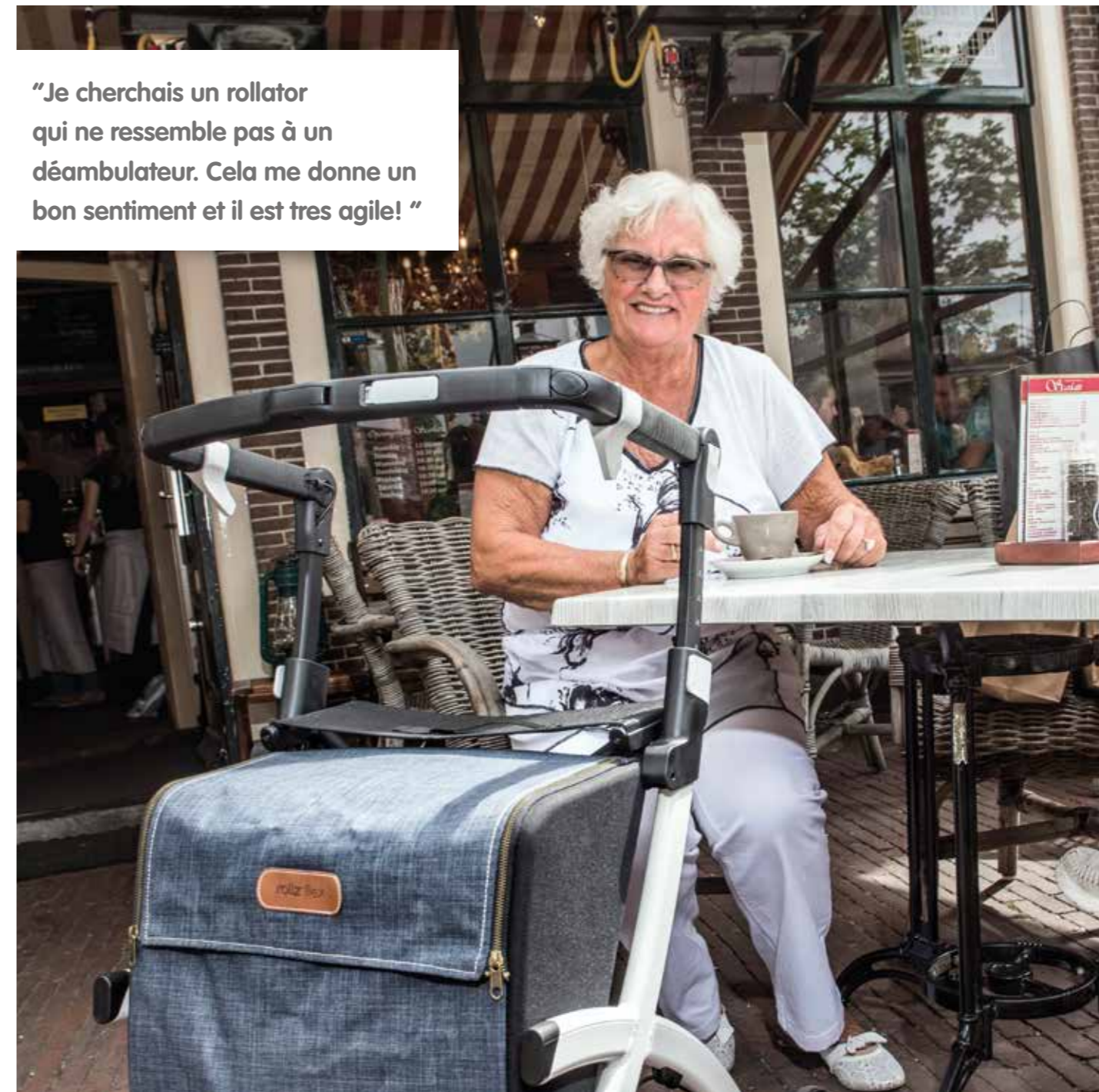

“Je cherchais un rollator qui ne ressemble pas à un déambulateur. Cela me donne un bon sentiment et il est tres agile! ”

Sortir avec le Rollz Flex

Rollator design avec grand sac

À première vue, on ne peut pas voir que c'est un rollator. C'était exactement l'intention des concepteurs: un beau design avec lequel vous aimeriez sortir! Avec ce rollator sûr, vous pouvez manœuvrer facilement. Vous marchez de manière stable et confortable, tandis que le gros sac se remplit lentement. Même avec le sac plein de courses, le Rollz Flex garde une conduite très souple.

...



rollz flex

Caractéristiques du produit Rollz Flex

Élégant

Rollator entièrement certifié avec le look de shopper design.

Flexible

La poignée est ajustable en hauteur. On peut la placer en hauteur, vers l'arrière ou l'avant en position rollator, comme sur la photo.

Se reposer

Se reposer un peu sur l'assise en simili cuir ; la poignée forme alors le dossier.

Léger et compact

Le Rollz Flex ne pèse seulement que 7,4 kg et se referme facilement en un objet compact.

Franchir les seuils

Vous accédez facilement aux trottoirs avec l'aide pour franchir les seuils, même avec un sac plein.

Sûr

Choix entre frein « flip » et « frein classique » par tous les temps, un freinage sûr et dosé. Les câbles de frein sont dissimulés dans le cadre.

Grand sac

Dans le grand sac étanche, on peut mettre 20 kg. Sac intérieur amovible compris.

Conduite confortable

Facilité de conduite et suspension naturelle grâce aux pneus lisses.



Maniable

Que vous l'utilisiez à l'intérieur ou que vous fassiez du shopping ou que vous alliez boire un café quelque part, avec votre Rollz Flex, tout se passe bien. Vous pouvez facilement manœuvrer n'importe où. Les roues avant et arrière sont proches les unes des autres : votre rollator tourne autour de vous. De cette façon, vous pouvez tourner en douceur, même dans un couloir étroit.

Si vous faites un virage, les roues ne vous gênent pas. Même si le sac est plein, la conduite reste souple. Vous pouvez monter et descendre le trottoir avec l'aide bordures. Le Rollz Flex est donc un rollator agile.



rollz flex

Données de produit

Rollz Flex: poids 7,4 kg

Sac Rollz Flex : 25 litres / 20 kg

Charge maximum : 125 kg

Taille utilisateur : env. 1,55 – 1,95 m

Freins : frein « flip » ou frein « classique », au choix

HxLxL déplié : 80-100 × 62 × 60 cm

HxLxL replié : 80-100 × 33 × 60 cm

Largeur du siège : 44 cm

Hauteur du siège : 62 cm

Diamètre roue avant : 8 pouces

Garantie :

5 ans sur le cadre et 2 ans sur les autres pièces, pièces sensibles à l'usure non comprises.

En position rollator, le Rollz Flex est un rollator complet certifié par TÜV.

Rollz Flex Small : poids 6,8 kg

Sac Rollz Flex : 14 litres / 20 kg

Charge maximum : 125 kg

Taille utilisateur : env. 1,40- 1,60 m

Freins : « classique »

HxLxL déplié : 70-81 × 62 × 60 cm

HxLxL replié : 70-81 × 33 × 60 cm

Largeur du siège : 44 cm

Hauteur du siège : 52,5 cm

Diamètre roue avant : 8 pouces

Le sac du Rollz Flex est fabriqué en matériaux étanches. Il est disponible en deux couleurs : **violet vif** et **gris denim**.





Housse de voyage Rollz Motion

Pour protéger correctement votre Rollz Motion pendant le transport aérien, placez-le de manière compacte dans la housse de voyage. De cette façon, tout est bien protégé.



Sac Shopper Rollz Motion

Ce shopper élégant et fonctionnel peut être cliqué sur le cadre du Rollz Motion. Une journée de shopping? Merci au shopper cliqué sur votre rollator, vous n'avez pas besoin de le porter.



Porte-canne Rollz Motion

Le porte-cannette Rollz Motion se glisse facilement sur le cadre de votre rollator. Par exemple, une bouteille d'eau peut être prise partout.



Supports 3-en-1 Rollz Motion

Avec ces supports 3-en-1, le paquet de fauteuil roulant peut également être suspendu au-dessus du siège. Cela vous donne plus de profondeur de marche et de liberté de mouvement. Un support de bâton et de sac est intégré.

accessoires rollz

Dossier Rollz Motion

Vous partez faire un tour seul avec votre Rollz Motion en position rollator? Avec ce support dorsal, vous pourrez vous reposer en route en vous appuyant contre le dossier souple.



Repose-pieds Rollz Motion en différentes hauteurs

Choisissez la taille du repose-pied qui correspond à la longueur de vos jambes pour encore plus de confort. La petite version est 5 cm plus courte, la grande version 5 cm plus longue.



Porte-canne Rollz Flex

Le porte-canne se clipse sur à poignée du Rollz Flex. Presque chaque cannes se glisse dans ce porte-canne. Si vous avez besoin de votre canne, vous pouvez l'enlever facilement.



Crochets pour sac Rollz Flex

Allez-vous faire des achats intensifs? Avec cet ensemble de deux crochets, vous pouvez prendre un ou deux sacs en plus.



Rollz International BV

Les rollators Rollz sont aussi en vente en Belgique, France, en Suisse et au Canada chez nos importateurs exclusifs.

www.rollz.com

rollz®

En Belgique et en France:

Mobio
Mobio service:
info@mobio.be
Tel: +32 9 328 77 23
www.mobio.be

En Suisse:

Bimeda AG
Bimeda service:
bimeda@bimeda.ch
Tel: +41 44 872 97 97
www.bimeda.ch

Au Canada:

Triumph Mobility
Triumph service:
info@triumphmobility.com
Tel: +1 855 546 0711
www.triumphmobility.com

...